

Lue käyttöohjekirja ennen käyttöä



Jos tarvitset apua tämän laitteen käyttöä, ota yhteyttä Terveystekniikan asiakaspalveluun: info@terveystekniikka.fi | puh. 030 835 6332

1. LATAUS

Kun laitteeseen kytketään virta, virtapainikkeeseen syttyy värillinen LED-merkkivalo. Vihreä valo osoittaa, että laitteessa on riittävästi akkuvirtaa. Kun painikkeessa näkyy punainen valo, se tarkoittaa, että laite on ladattava. Laite sammuu automaattisesti yhden (1) minuutin kuluttua. Latauksen aikana virtapainike näyttää sinistä valoa, joka sammuu, kun laite on ladattu täyteen.

Käytä vähintään 5 V:n 1,5 A:n USB-virtalähdettä, jotta laite toimii oikein ja tehokkaasti. Lataa laite, kun akku on tyhjentynyt, jotta sen suorituskyky säilyy.

2. SÄILYTYS

Täi-imurin pakkaus on suunniteltu laitteen säilytykseen käytön ja puhdistuksen jälkeen. Varmista, että kampauspää on säilytysasennossa (suoran ja haravointiasennon välissä – katso kohta 4.) vetämällä sinistä liukunappia alas ja säätämällä kulmaa, kunnes kampaosa napsahtaa paikalleen. Kiinnitä laite pakkaukseen kohdistamalla laitteen sivulla olevat ontot osat pakkauksen vastaaviin.

3. KERÄYSSUODATTIMEN ASENNUS




Vaihdettavat keräyssuodattimet toimitetaan uudelleensuljettavissa kääreissä, joissa kussakin on kolme (3) yksikköä. Repäise kääre auki, ota yksi (1) keräyssuodatin ja sulje pakkaus uudelleen.

Avaa laitteen lukitus kohdistamalla kampaosan ohjausnuoli lukituksen avaussymboliin. Aseta keräyssuodatin (pyöreä aukko ylöspäin) laitteen rungon läpinäkyvään osaan.

Kiinnitä kampaosa varovasti takaisin runkoon kohdistamalla ohjausnuoli lukosymboliin.

5. KAMPAUSOHJEET

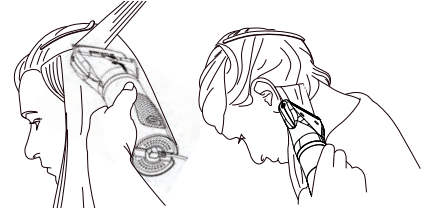


Harjaa hiukset ensin takkujen poistamiseksi ja erota osiin hiusklipeillä. Varmista, että täi-imuri on oikein päin ja aloita hoito niskasta ylöspäin osa kerrallaan. Kampaa hiukset osissa, jotka eivät ole leveämpiä kuin kampa, ja aloita läheltä päänahkaa. Kampaa jokainen osa läpi useita kertoja jokaiseen suuntaan (ylhäältä, alhaalta, vasemmalta ja oikealta).

4. KAMPAUSKULMAT



Voit muuttaa kampauskulmaa vetämällä V-Comb A1 -logon yläpuolella olevaa sinistä liukunappia alas, pitämällä sitä painettuna ja säätämällä harjojen kulmaa. Vapauta nappi kiinnittäaksesi sen paikalleen. Kampausasentoja on kaksi (suora tai haravointi) ja lisäksi yksi asento vain varastointia varten.

6. HYGIEENINEN HÄVITTÄMINEN

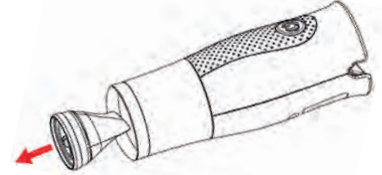

Hävitä keräyssuodatin hygieenisesti irrottamalla kampauspää rungosta kiertämällä ohjausnuolen kohdistamiseksi "lukko auki" -symbolia kohti. Kallista sitten runkoa varovasti roskakorin päälle, kunnes suljettu keräyssuodatin putoaa automaattisesti.



4-VAIHEINEN HOITO-OPAS

Vaihe 1: TUNNISTUS

Kun epäilet tartuntaa, käytä täi-imuria selvittääksesi, onko hiuksissa täiden, nymfien, munien tai punaisten haavaumien merkkejä. Jos keräyssuodattimeen kertyy täitä ja muna, aloita poistamisprosessi.

Käytä tarkistamiseen täi-imuria

Vaihe 2: POISTAMINEN

Käytä täi-imuria päivittäin päästäksesi eroon aikuisista päästäistä, nymfeistä ja elävistä munista.

Kampaa päivittäin 1–3 päivän ajan

Vaihe 3: TARTUNNAN KATKAISEMINEN

Jatka täi-imurin käyttöä poistaaksesi mahdollisesti jääneet munat, äskettäin kuoriutuneet nymfit tai uudet päästäit.

Kampaa vielä 7. päivänä

Vaihe 4: ENNALTAEHKÄISY

Tarkista vielä, onko päässä uusia täitä, jotka ovat saattaneet tulla toisilta ihmisiltä.


Käytä tarvittaessa kerran viikossa



©2021 ToLife Technologies Pty Ltd.
V-Comb® A1 on patentoitu ja suunniteltu rekisteröity tuote.
V-Comb® on rekisteröity tavaramerkki.

www.tai-imuri.fi

TÄIDEN ELINKAARI

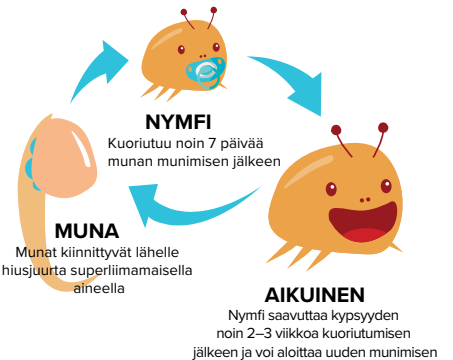

Täit elävät noin 30 päivää, ja yksi naarastai voi munia elinaikanaan jopa 150 munaa.

Munat (nitsit) kuoriutuvat 7–10 päivässä, minkä vuoksi on tärkeää käyttää täi-imuria päivittäin muutaman päivän ajan aktiivisen tartunnan aikana.

Elinkaaren katkaiseminen on välttämätöntä, jotta kaikki mahdollisesti jäljelle jääneet munat, täit tai uudet täit voidaan poistaa ennen kuin ne saavuttavat kypsyyden.

Terveystekniikka

info@terveystekniikka.fi | puh. 030 835 6332